

rollz®

hjælper dig frem



Rollatorer i flot design

Livet er en fantastisk rejse, og Rollz Motion hjælper dig med at leve livet fuldt ud. Hvad enten det gælder en gåtur i parken, et besøg på museum, en ferierejse eller en indkøbstur, så hjælper vores Rollz Motion² og Rollz Flex dig med at komme derhen du vil. Når du vil.



Kom ud på tur med Rollz Motion²

En rollator og transportstol i ét

Rollz Motion² gør det trygt og sikkert at komme ud og omkring i dagligdagen. Også de dage, hvor der er fuldt program. Skal du f.eks. en tur i byen, se på seværdigheder, nyde udsigten ved havnen og spise middag på en restaurant om aftenen, så kan du skiftevis gå selv med hjælp fra Rollz Motion² som rollator og tage et hvil og blive skubbet noget af vejen ved at bruge Rollz Motion² som transportstol. Det bliver en god dag med masser af oplevelser.



rollz motion

Egenskaber Rollz Motion²

Elegant

Prisvindende hollandsk design-rollator og transportstol. Dit valg, når du vil frem med stil.

Sikkerhed

Sikre og stærke bremses i alle situationer og vejrforhold.

Bekvem

Du kan hurtigt tage et hvil på den behagelige pude eller lave rollatoren om til en transportstol.

Hjælp ved høje kanter

Tryk på pedalen, så kommer du nemt over dørtræsklen eller kantstenen.

Stabil

Gå sikkert og med god støtte fra de ergonomisk udformede håndtag, som du kan justere i højden.

Kompakt

Rollz Motion² er nem at slå sammen, så den ikke fylder ret meget. F.eks. i bilens bagagerum.

Behagelig

Støddæmpende takket være de bløde hjul og skumpolstring af håndtagene.

Nem at manøvrere

Let at køre, dreje og styre på grund af forhjulenes gode køre- og drejeegenskaber.



Enkel at indstille

Med et par enkle greb kan du indstille Rollz Motion² rollatoren til en transportstol og tilbage igen. Det giver dig selvtiliden til at tage en lidt længere tur, når du ved, du kan sætte dig og blive skubbet, hvis du bliver træt undervejs.

Rollz Motion² er tilgængelig i fire farver: pebble white, dark purple, matt black and island blue.

Rollz Motion² Small er tilgængelig i farverne: island blue og matt black.



rollz motion

Se Rollz Motion i brug:






“Nu tør jeg gå længere med rollator, fordi jeg ved, at når jeg bliver træt, kan jeg tage et hvil i transportstolen undervejs.”

Behagelig og sikker også i ujævnt terræn

Rollator og transportstol i ét – klarer alle former for terræn

Takket være de luftfyldte dæk får du en bekvem tur med Rollz Motion Performance også på ujævne fortove og stier.

Den ekstra tykke polstring af armstøtterne og de ergonomisk udformede håndtag gør det endnu mere bekvemt. Fodstøtterne er højdejusterbare.

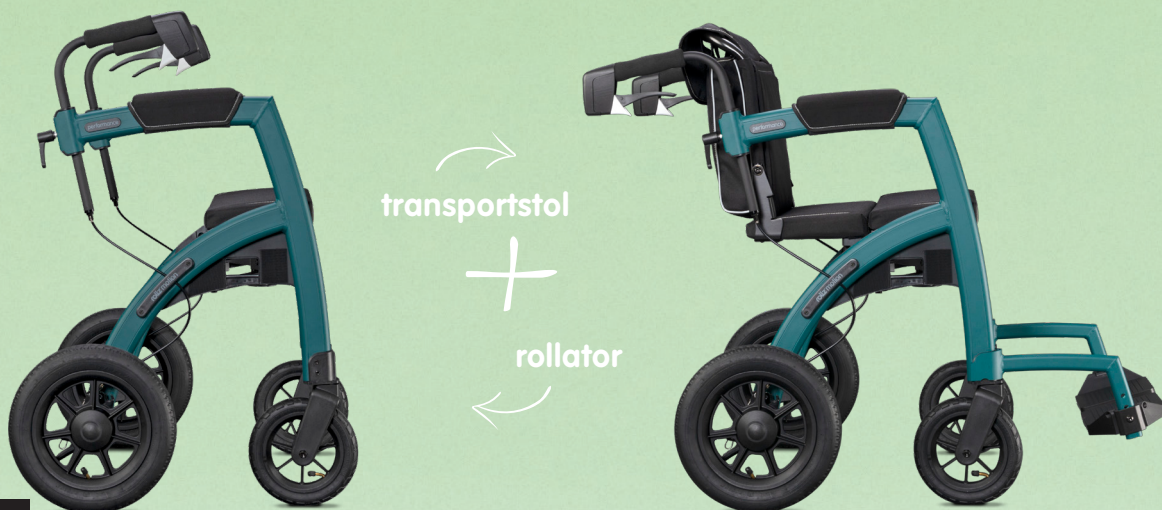

rollz motion
performance

Egenskaber Rollz Motion Performance

Elegant 2 i 1

Hollandsk design som gør, at man kan gå ud med stil – ændres fra rollator til transportstol på nogle sekunder.

Ergonomiske greb

Ergonomisk udformede bløde greb giver optimalt støtte.

Løjnefaldende farver

Moderne mat overflade i den nye farve jungle green.

Synlig

Synlig i mørket takket være flere reflekser.

Blød polstring

Armstøtter med ekstra tyk skumbeklædning for øget komfort.

Stabilt sæde

Kileformet sæde giver bedre siddestilling.

Luftfyldte dæk

Robuste luftfyldte dæk muliggør behagelige ture på ujævne veje.

Stabil

Gå sikkert og stabilt, støttet af den robuste design.



NYHED

terræn
gående
version



rollz motion
performance

Specifikationer

	Rollz Motion ²	Rollz Motion ² Small	Rollz Motion Performance
Vægt rollator	11,6 kg	11,6 kg	11,4 kg
Vægt transportstol	3,4 kg	3,4 kg	3,4 kg
Maxbelastning	125 kg	125 kg	125 kg
Brugerhøjde	1,60 - 1,90 m	1,50 - 1,85 m	1,60 - 1,90 m
Sædehøjde	55 cm	50 cm	55 cm
Højde, greb	87-98 cm	82-94 cm	86-98 cm
Sædestørrelse rollator	20 x 45 cm	20 x 45 cm	20 x 45 cm
Sædestørrelse transportstol	42 x 45 cm	42 x 45 cm	42 x 45 cm
Total bredde	67 cm	67 cm	67 cm
Total længde	63 cm	63 cm	63 cm
Bredde sammenfoldet	31 cm	31 cm	29 cm
Diameter forhjul	ca. 20 cm	ca. 20 cm	Dæk ca. 20 x 3 cm
Diameter baghjul	ca. 30 cm	ca. 30 cm	Dæk ca. 32 x 6 cm

Garanti: 5 år på stel og 2 år på andre dele, dog ikke normal slitage.



“Jeg ledte efter en rollator, som ikke ser ud som en rollator. And handle nu føles bare rigtigt godt, for rollatoren er så let at manøvrere!”



rollz flex

Kom ud på tur med Rollz Flex

Designrollator med en stor indkøbstaske

Ved første øjekast ser den ikke ud som ganghjælpemiddel. Det var præcist det, som designerne havde som mål. At skabe et flot design til udendørs brug.

Denne rollator er let at manøvrere om man går stabilt og komfortabelt samtidig med, der er masser af plads til indkøbene i tasken.



Se Rollz Flex i brug:



Manøvrering

Du manøvrerer let omkring også forbi forhindringer. For- og baghjulene er placeret tæt på hinanden, hvilket betyder, at rollatoren roterer tæt på dig. Det gør, at du kan svinge og dreje også når der er småt med plads.

Når du drejer kommer hjulene ikke i vejen. Du kan nemt trække til siden f.eks. for at tage noget ud af et skab eller ned fra en hylde. Rollz Flex fungerer lige godt også med tasken fuld.

Du kan nemt komme over bump og kantsten takket være kantstenspedalen.



rollz flex

Egenskaber Rollz Flex

Elegant

Certificeret rollator – med et udseende som en designer-indkøbsvogn.

Fleksibel

Håndtaget justeres nemt i forskellige højder.

Praktisk

Den store vandtætte taske indeholder op til 20 kg. Der medfølger udtagelig indvendig taske.

Behagelig

Behagelig køretur takket være de bløde dæk.

Manøvrering

Let at styre ved enkle bevægelser takket være den snævre svingradius.

Sikker

Sikre bremses i al slags vejr. Bremsekablerne er gemt inde i rammen.

Bekvem

Hvil dig på sædet mens du bruger håndtaget som stabil rygstøtte.

Enkel hjælp

Kom nemt henover dørtærsklen ved hjælp af dørtærskelpedalen – også når tasken er pakket helt fuld.

Let og kompakt

Rollz Flex vejer kun 7.4 kg og er let at folde sammen til en kompakt pakke.



Quality
Regular
Product
Surveillance

www.tuv.com
ID 0000051093



rollz flex

Produktegenskaber

Rollz Flex: 7.4 kg

Brugerhøjde: 1.55-1.95 m

Sædehøjde: 62 cm

Sædebredde: 44 cm

Vægtkapacitet: 125 kg

Total bredde: 62.3cm

Total længde: 60 cm

Dybde, sammenfoldet: 33 cm

Taskens kapacitet: 25 liter/20 kg

Rollz Flex Small: 6.8 kg

Brugerhøjde: 1.40-1.60 m

Sædehøjde: 52.5 cm

Sædebredde: 44 cm

Vægtkapacitet: 125 kg

Total bredde: 62.3cm

Total længde: 60 cm

Dybde, sammenfoldet: 33 cm

Taskens kapacitet: 14 liter/20 kg

Rollz Flex tasken er udført i holdbart og vandafvisende materiale. Den findes i to stelfarver (sort og hvid) og to farver på tasken (bright purple og denim grey).

Garanti: 5 år på stellet og 2 år på øvrige dele, gælder dog ikke normal slitage.

I rollatorindstilling er **Rollz Flex** TÜV-certificeret som rollator.





Rollz Motion transportbetræk

Takket været det unikke design af Rollz transportbetrækket er både Rollz Motion og kørestolspakken godt beskyttet under transport. Anvendelsen af transportbetrækket beskyttet til forbygge skader og skrammer.



Rollz Motion taske

Den stilfulde og nyttige taske kan nemt placeres på rammen af Rollz Motion, og du kan nemt lægge varerne direkte ned i tasken. Når du har tasken med, behøver du ikke en ekstra indkøbspose.



Rollz Motion kopholder

Tag en vandflaske med på turen. Kopholderen er indstillelig i højden, så du altid har drikkeelse lige ved hånden.



Rollz Motion 3-i-1 transportstol-holder

Med denne holder kan du hænge transportstol-pakken over sædet. Det giver dig mere plads til bevæge dig tæt på rollatoren. Der er integreret stokkeholder og indkøbsposeholder.



Rollz Motion paraply

Beskytter dig mod både regn og sollys. Den sættes fast på stellet, så du kan holde fast i rollatoren med begge hænder af hensyn til sikkerheden.

Rollz Motion rygstøtte

Er du ude på egen hånd og har efterladt transportstol-pakken hjemme? Denne rygstøtte giver dig støtte ved korte vil, når du læner dig mod det bløde bånd.



Rollz Motion sikkerhedsbælte

Bæltet holder sig sikkert på plads, når du sidder i transportstolen. Det kan let placeres og justeres i den ønskede længde.



Rollz Flex stokkeholder

Stokkeholderen fastgøres til håndtaget. Den er udformet, så den passer til de fleste stokke.



Rollz Flex kroge til indkøbsposer

Når du er ude og handle kan du ved hjælp af disse kroge tage to poser mere med.



Rollz Flex paraply

Beskytter dig mod både regn og sollys. Den sættes fast på stellet, så du kan holde fast i rollatoren med begge hænder af hensyn til sikkerheden.



Rollz International BV
www.rollz.com



Forhandler:
Welldana Innocare

Randersvej 6, 6700 Esbjerg
www.welldana-innocare.dk
km@welldana.com
+45 75 27 23 33



rollzint



RollzInternational



rollzint



RollzInternational